




Allium™ Medical

BIS - Proteza do dróg żółciowych

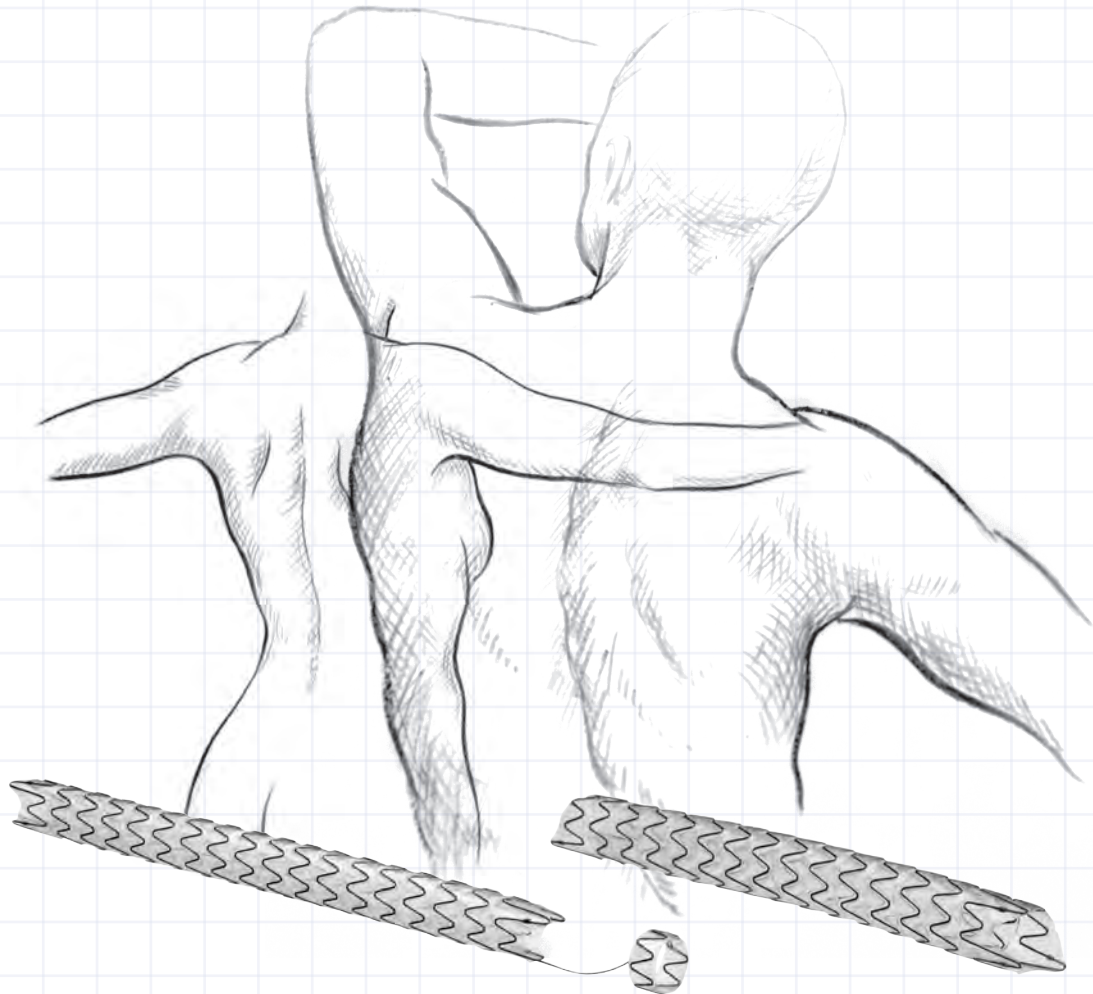

Proteza Allium BIS



jest przeznaczona do leczenia przewlekłych zwężeń przewodu żółciowego wspólnego, poprzez umożliwienie otwarcia zablokowanego pasażu i przepływ żółci, w długim okresie po implantacji. Specjalnie zaprojektowany korpus protezy posiada dużą średnicę i siłę promieniową oraz konstrukcję zmniejszającą możliwość migracji protezy, refluksu i rozwoju reaktywnej, proliferacyjnej tkanki na jej końcach. Unikalne cechy protezy pozwalają lekarzowi łatwo i bezpiecznie usunąć protezę, zawsze gdy zajdzie taka potrzeba.

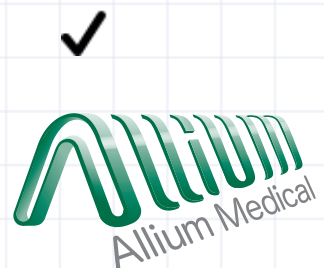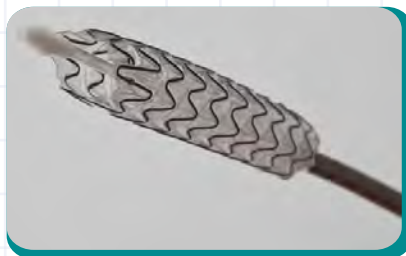

BIS – Proteza do dróg żółciowych

Cechy i korzyści

1. Unikalna powłoka - pełne pokrycie polimerową powłoką mające na celu zapobieganie: wzrostowi tkanki do światła, zmniejszaniu inkrustacji, powstawaniu kamieni i kalcyfikacji.
2. Ogrniczona migracja - proteza posiada kotwę odwunastniczą zapobiegającą migracji do góry.
3. Łatwe i bezpieczne usuwanie - proteza jest usuwana poprzez sprucie w wąską tasiemkę.
4. Elastyczność - bardzo elastyczna, aby zapewnić minimalne podrażnienie i maksymalny komfort.
5. Łatwe zakładanie - proteza nie ulega skracaniu podczas zakładania, a markery RTG umożliwiają dokładne pozycjonowanie w fluoroskopii.
6. Implantacja na długi okres - przeznaczona do usuwania w okresie do 3 lat od implantacji, co może eliminować potrzebę powtarzania procedur.

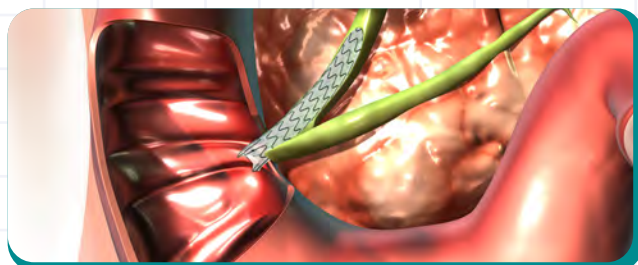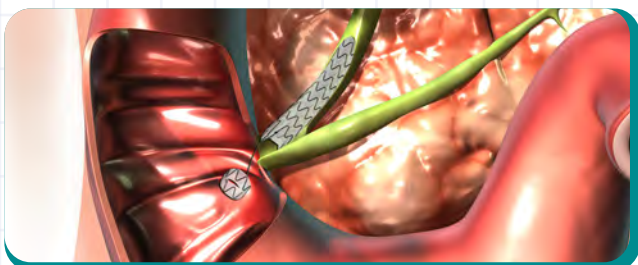

Unikalna konstrukcja umożliwiająca łatwe i bezpieczne usunięcie protezy Allium BIS


Krok 1



Krok 2



Krok 3

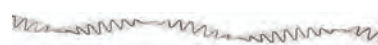

Dostępne wersje protezy

System wprowadzania

Proteza jest dostarczana na 10 Fr endoskopowym (retrograde) lub przez-skórnym (antegrade) systemie wprowadzania.

Rozmiary protez

Dostępne są protezy z kotwą i bez kotwy o długości 6, 8, 10 i 12 cm oraz średnicach 8 i 10 mm.

Rodzina nowej generacji protez firmy Allium zawiera ponadto:

RPS - Okrągła proteza szyi pęcherza

TPS - Trójkątna proteza stercza

BUS - Proteza cewki moczowej

URS - Proteza do moczowodów

O firmie

Allium™ Medical jest producentem, wytwórcą i dostawcą w pełni pokrywanych, dopasowanych do konkretnego miejsca, protez do dróg moczowych i żółciowych nowej generacji. Protezy te zostały opracowane w odpowiedzi na potrzeby i problemy związane z dotychczas dostępnymi protezami.

Kontakt:

info@allium-medical.com

2 Ha-Eshel St., PO Box 3081

Caesarea Industrial Park

South 38900 Izrael

Tel: +972-4-6277166

Fax: +972-4-6277266

www.allium-medical.com

CE Worldwide patents and patents pending.

