

Informacja o

ASSITM

BEACONTM

TISSUE MARKER



Wyjątkowa wizualizacja

- Zapewnia doskonałą i permanentną wizualizację znacznika po biopsji piersi
- Pierwszy znacznik tkankowy z zastosowaniem polimerów polieterokestanoktonowych (PEKK), które są rutynowo stosowane w implantach
- Sprawdzona klinicznie biokompatybilność pozwala na trwałą implementację znacznika w tkankę piersi
- Ze względu na permanentną wizualizację idealnie nadaje się do terapii neoadjuwantowej

Beacon™ Breast Tissue Marker

Beacon™ Tissue Marker ze względu na swoją niemetaliczną strukturę, ma niski artefakt MRI w porównaniu do tkankowych markerów wykonanych z metali, a także nie daje artefaktów w tomosyntezie.


Beacon™ Tissue Marker jest pierwszym markerem, w którym zastosowano polimer polieterokestanoktonowych (PEKK) w celu wizualizacji miejsca ze zmianą nowotworową. PEKK jest rutynowo stosowany w implantach chirurgicznych i stomatologicznych.

Klinicznie udowodniona biokompatybilność pozwala na trwałe umieszczenie markera w tkance barwionej.

Cechy

- Unikatowy kształt, tak zaprojektowany by zapobiegał migracji w tkance
- Możliwość zastosowania w tomosyntezie oraz terapii neoadjuwantowej
- Bezpieczny niezawodny, ergonomiczny i prosty w obsłudze
- Dostępny w wersji do biopsji wspomaganej próżnią oraz do standardowej biopsji gruboigłowej
- Permanentna, czytelna wizualizacja markera w rutynowych metodach obrazowania

Wizualizacja markera w różnych metodach obrazowania

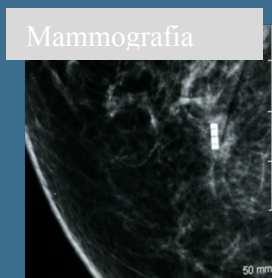

Permanentna widoczność markera w:

- USG
- RTG
- Mammografii
- MRI (do 3,0 natężenia pola Tesli)

Niezawodny, bezpieczny i prosty w obsłudze



To nie jest naturalny rozmiar.
Wymiary markera:
1,5mm x 5mm

Nr katalogowy	Opis produktu	Ilość w opakowaniu
BM1412-50	Beacon™ Tissue Marker	10 szt.
BM1412-50 - F	Beacon™ Tissue Marker (SE) For Stereotactic Hologic Eviva	10 szt.

Dystrybutor:



seedmed

ul. Lewandowskiego 1
62-010 Pobiedziska

tel. +48 668 250 118
mail: biuro.office@seedmed.pl

SCION MEDICAL TECHNOLOGIES



90 Oak Street | Newton, MA | 02464

TOLL FREE: 888-582-6211
www.scionmedtech.com
info@scionmedtech.com

