
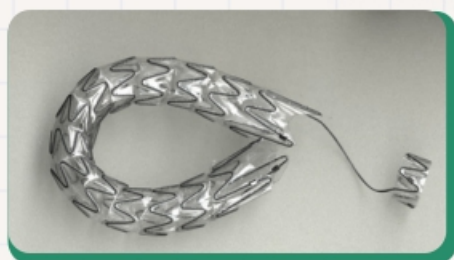


Allium™ Medical

Allium URS – Proteza do dróg moczowych

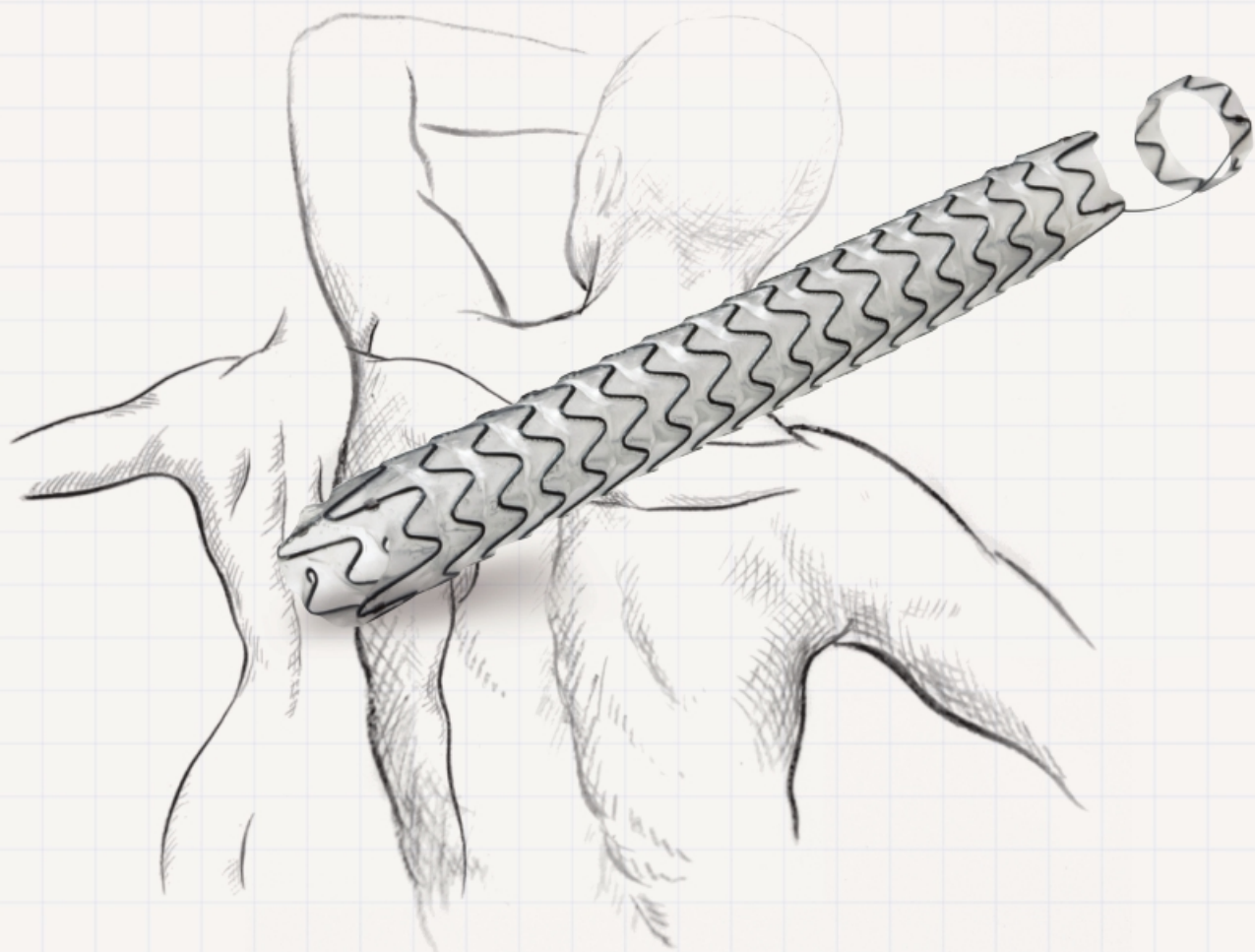

The Allium URS


Procedura zakładania protez przy użyciu URSu stosujemy w przewlekłych łagodnych i złośliwych zmianach wpływających na zmniejszenie światła moczowodu. Specjalnie zaprojektowany korpus protezy posiada dużą średnicę i siłę promieniową oraz konstrukcję zmniejszając możliwość migracji protezy, refluksu i rozwoju reaktywnej, proliferacyjnej tkanki na jej końcach. Unikalne cechy protezy pozwalają lekarzowi w łatwy i bezpieczny sposób usunąć stent, zawsze gdy zajdzie taka konieczność.



URS – Stent moczowodowy

Cechy i korzyści

1. Unikalna powłoka – pełne pokrycie stentu polimerową powłoką mającą na celu zapobieganie: wzrostowi tkanki do światła, zmniejszaniu inkrustacji, powstawaniu kamieni i kalcyfikacji.
2. Ograniczona migracja - proteza posiada kotwę zapobiegającą migracji do góry.
3. Łatwe i bezpieczne usuwanie - proteza jest usuwana poprzez sprucie w wąską tasiemkę.
4. Duża elastyczność - bardzo elastyczna, aby zapewnić minimalne podrażnienie i maksymalny komfort.
5. Łatwe zakładanie - proteza nie ulega skarceniu podczas zakładania, a markery RTG umożliwiają dokładne pozycjonowanie w fluoroskopii.
6. Implantacja na długi okres - przeznaczona do usuwania w okresie do lat od implantacji, co może eliminować potrzebę powtarzania procedur.

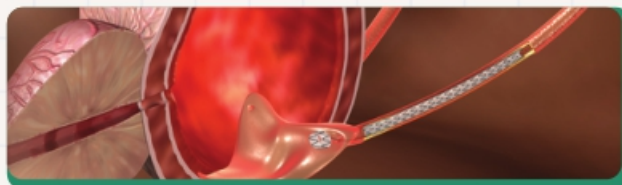

Allium's unique stent unraveling feature



Dostępne wersje proterz

System wprowadzania

Proterę dostarczana wraz z endoskopowym (retrograde) lub przezskórnym (antegrade) systemem wprowadzania.

Rozmiary protez

Dostępne są protezy w rozmiarach: 8mm (24 Fr) oraz 10mm (30 Fr) o długości 100mm i 120mm.

Rodzina nowej generacji protez firmy Allium zawiera ponadto:

TPS – Trójkątna proteza stercza

RPS – Okrągła proteza szyi pęcherza

BUS – Proteza cewki moczowej

O firmie

Allium™ Medical jest producentem, wytwórcą i dostawcą w pełni pokrywanym, dopasowanym do konkretnego miejsca, protez moczowych i żółciowych nowej generacji. Protezy te zostały opracowane w odpowiedzi na potrzeby i problemy związane z dotychczas dostępnymi stentami

Kontakt:

info@allium-medical.com

2 Ha-Eshel St., PO Box 3081
Caesarea Industrial Park South
38900 Israel

Tel: +972-4-6277166

Fax: +972-4-6277266

www.allium-medical.com

CE Worldwide patents and patents pending.

